



Anschlussbuchsen und Bedienelemente

Steckerseite:

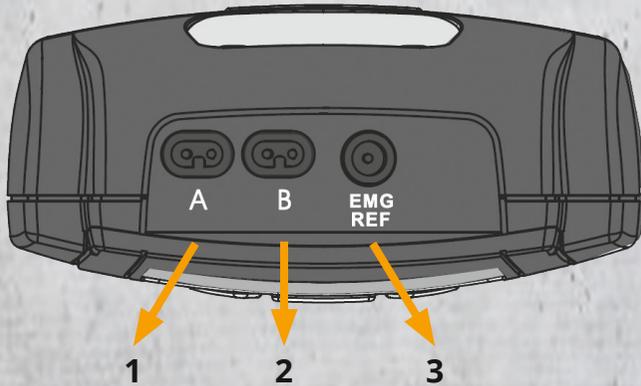

Frontseite:

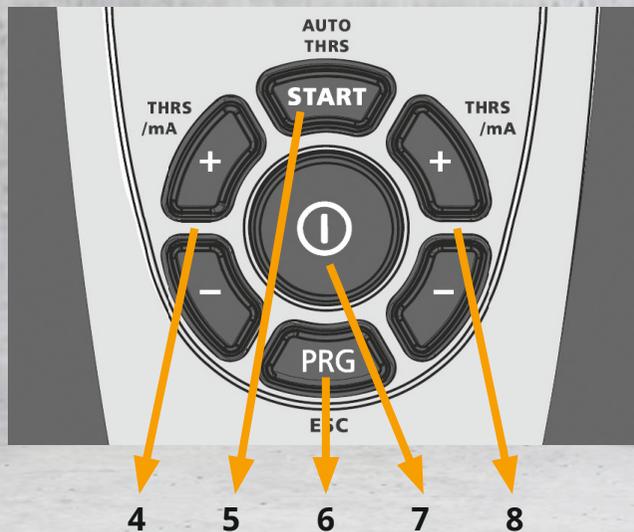

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Kanal A | 5 Start-Taste |
| 2 Kanal B | 6 Programmwahl (PRG) |
| 3 Referenzelektrode (EMG-REF) | 7 Ein/Aus-Taste |
| 4 Intensitätsregler Kanal A (+/-) | 8 Intensitätsregler Kanal B (+/-) |

Besuchen Sie doch auch mal unseren Online-Shop. Wir freuen uns auf Sie!
www.medizintechnik-heise.de

Vertrieb durch:



Medizintechnik Dipl.-Ing. Heise Vertriebs-GmbH
 Berghofer Str. 201
 44269 Dortmund

Telefon: 0231.48 84 45 (24-h Beratungshotline)
 Telefax: 0231.48 22 98

info@medizintechnik-heise.de
www.medizintechnik-heise.de

Kurzanleitung für Patienten



DUOBRAVO U

Zusatzinformationen zur Gebrauchsanweisung für das Therapiegerät



Patienten-Kurzanleitung DUO BRAVO U

Therapievorbereitung:

- Das einadrige Kabel mit dem Anschluss Referenzelektrode (EMG-REF) mit einer Oberflächenelektrode verbinden.
- Das zweiadrige Kabel mit Kanal A und der beiliegenden Sonde verbinden. Referenzelektrode an die Leiste kleben.
- Vaginal-/Rektalelektrode mit Gleitgel bestreichen und einführen.
- Gerät mit Ein/Aus Taste (6) einschalten.
- Ggf. Programm wählen mit der PRG - Taste (7)
- START-TASTE (5) drücken.
- Ansage Pause – Muskulatur entspannen (Handsymbol offen)
- Ansage Arbeit – Muskulatur anspannen (Handsymbol Faust)

● Programm 01 mit Referenzkabel

(BF/ES 35 Hz, 4 Sek. Strom / 8 Sek. Pause, 8 Sek. Arbeit / 8 Sek. Pause, 15 Durchgänge

Gerät führt Test durch (10 Sek. Pause / 5 Sek. Arbeit 2 Wiederholungen)

Die 0 mA in der untersten Zeile links blinkt. Bitte jetzt mit der linken + / - Taste die Intensität der Stromstärke einstellen. Der Strom sollte deutlich spürbar sein, darf aber nicht weh tun oder unangenehm sein.

Dann erfolgt im Wechsel 4 Sek. Strom / 8 Sek. Pause, dann 8 Sek. Arbeit (Faust geschlossen – Anspannen) und 8 Sek. Pause (Hand offen – Entspannen)

Nach 15 Wiederholungen endet das Programm.

● Programm 02 mit Referenzkabel

(EMG Biofeedback ca. 12 Minuten, 40 Wiederholungen)

Gerät führt Test durch (10 Sek. Pause / 5 Sek. Arbeit 2 Wiederholungen)

Aktives Training beginnt

- 8 Sek. Arbeit Faust geschlossen
- 8 Sek. Pause Faust offen

Die Balkenanzeige zeigt die aktuelle Muskelanspannung. Bei der Arbeit den Muskel möglichst gut anspannen, bei der Pause gut entspannen.

Nach 40 Wiederholungen endet das Programm.

● Programm 04 mit Referenzkabel

(BF/ES 35 Hz im Wechsel ca. 30 Min., Phase 1: Stimulation / Phase 2: BF)

Gerät führt Test durch (10 Sek. Pause / 5 Sek. Arbeit 2 Wiederholungen)

Phase 1: Stimulation 5 Min.

Die 0 mA in der untersten Zeile links blinkt. Bitte jetzt mit der linken + / - Taste die Intensität der Stromstärke einstellen. Der Strom sollte deutlich spürbar sein, darf aber nicht weh tun oder unangenehm sein.

Phase 2: Aktives Training beginnt

5 Sek. Arbeit / 10 Sek. Pause, 25 Durchgänge. Die Balkenanzeige zeigt die Anspannung an. Bei der Arbeit den Muskel möglichst gut anspannen, bei der Pause gut entspannen.

● Programm 08 Mixed mit Referenzkabel

(BF/ES im Wechsel, 10 Hz ca. 20 Min., Phase 1: BF / Phase 2: Stimulation 10 Hz)

Gerät führt Test durch (10 Sek. Pause / 5 Sek. Arbeit 2 Wiederholungen)

Phase 1: Aktives Training BFB

- 5 Sek. Arbeit (Faust - Anspannen)
- 10 Sek. Pause (Hand offen – Entspannen)

30 Wiederholungen

Die Balkenanzeige zeigt die aktuelle Muskel- Anspannung. Bei der Arbeit den Muskel möglichst gut anspannen, bei der Pause gut entspannen.

Phase 2: Stimulation (10 Sek. Strom / 5 Sek. Pause)

Die 0 mA in der untersten Zeile links blinkt. Mit der linken + / - Taste die Intensität der Strom- Stärke einstellen. Der Strom sollte deutlich spürbar sein, darf aber nicht weh tun oder unangenehm sein.

Die Stimulation dauert 10 Min.

● Programm 09 ohne Referenzkabel

(Stimulation 10 Hz, 20 Min., Dranginkontinenz)

Die 0 mA in der untersten Zeile links blinkt.

Mit der linken + / - Taste die Intensität der Stromstärke einstellen. Der Strom sollte deutlich spürbar sein (klopfen, vibrieren), darf aber nicht weh tun oder unangenehm sein.

Die Stimulation dauert 20 Min.

● Programm 10 ohne Referenzkabel

(Stimulation 30 Hz., 20 Min. Stress /Stuhlinkontinenz) Stimulation

Die 0 mA in der untersten Zeile links blinkt.

Mit der linken + / - Taste die Intensität der Stromstärke einstellen. Der Strom sollte deutlich spürbar sein, darf aber nicht weh tun oder unangenehm sein.

Die Stimulation dauert 20 Min.

● Programm 15 ohne Referenzkabel

#15_(Schmerzprogramm 100 HZ im Wechsel mit 2 Hz im 3: 3 Sekunden Rhythmus)

Stimulation über Klebeelektroden 5x5 cm

Die 0 mA in der untersten Zeile links blinkt.

Mit der +/- Taste die Intensität der Stromstärke einstellen. Der Strom sollte deutlich spürbar sein, darf aber nicht weh tun oder unangenehm sein.

Die Stimulation dauert 30 Minuten.

Reinigung der Rektal-/Vaginalsonden
mit Wasser und Seife.
Mit klarem Wasser abwaschen – gut abtrocknen!!

Klebeelektroden von der Haut
zurück auf die Folie kleben!!